


# Comfortlift Mono

VOTRE MONTE-ESCALIER DISCRET

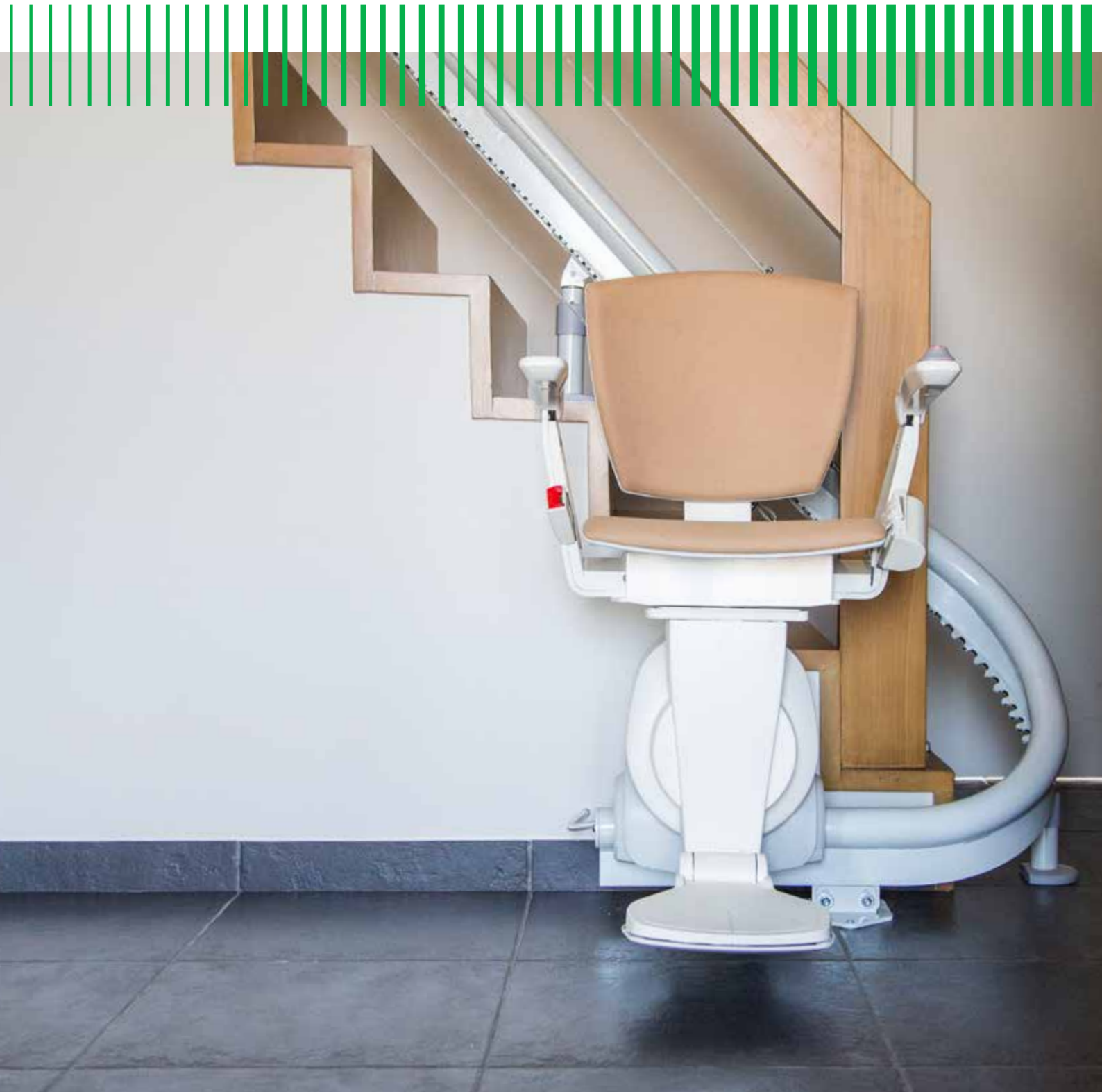

# Comfortlift Mono

## VOTRE MONTE-ESCALIER DISCRET

### Avantages du confortlift MONO


- ✓ Le monorail le plus compact
- ✓ Supporte jusqu'à 125 kg
- ✓ Monorail discret, installé très près des marches
- ✓ Idéal le long de la courbe intérieure des escaliers étroits
- ✓ Le rail peut être fixé au mur ou sur les marches
- ✓ Peut être prolongé en une fois vers le deuxième étage et même plus
- ✓ Siège compact au design élégant



### Monter et descendre votre escalier en toute sécurité

Grâce au Comfortlift Mono, vous et les autres habitants pouvez continuer à utiliser l'escalier sans aucune gêne. En effet, votre rampe reste en place et le côté le plus large de votre escalier reste entièrement accessible de sorte que votre escalier demeure pratiquement inchangé. Le Comfortlift Mono permet de monter et descendre l'escalier en toute sécurité.

Escaliers raides ou étroits, le Comfortlift Mono s'adapte facilement aux escaliers les plus compliqués et suit discrètement toutes les courbes. Le faible encombrement du rail assure à votre famille une utilisation en toute sécurité de l'escalier.

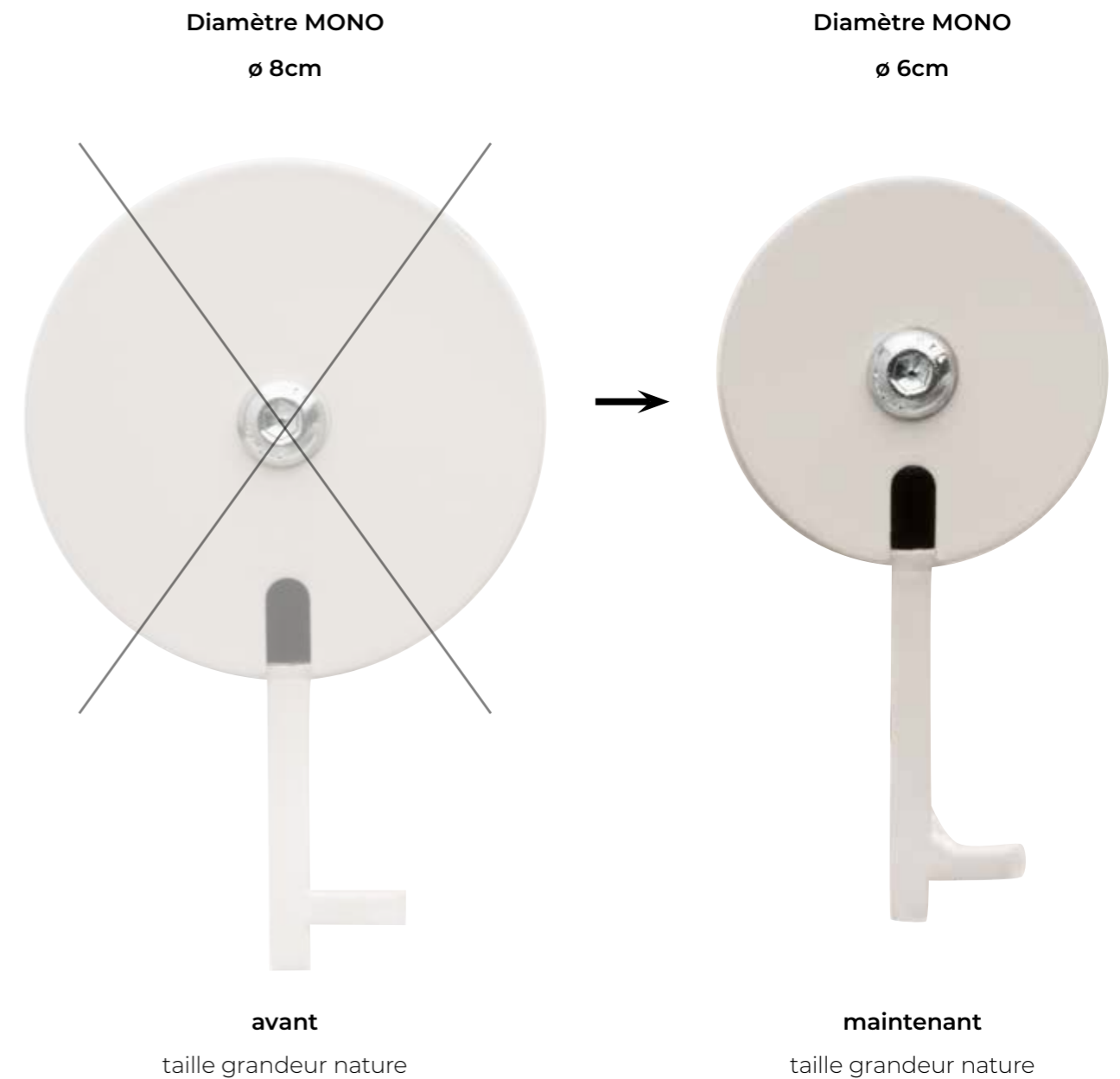

# Intuitive et facile à utiliser

VOTRE COMFORTLIFT A ÉTÉ CONÇU POUR ASSURER UNE FACILITÉ D'UTILISATION. SA MANIPULATION EST TRÈS INTUITIVE ET DEVIENDRA BIENTÔT UNE SECONDE NATURE.

## ÉTAPE 1



Vous appelez le monte-escalier à l'aide de la télécommande sans fil.

## ÉTAPE 2



Vous déployez le siège légèrement et facilement.

## ÉTAPE 3



Vous prenez place sur le siège confortable.

## ÉTAPE 4



Le monte-escalier démarre silencieusement et doucement.

## ÉTAPE 5




Le monte-escalier continue sa course vers le haut sans bruit et s'arrête automatiquement.

## ÉTAPE 6



Vous pouvez faire pivoter l'assise en haut.

## → SUR

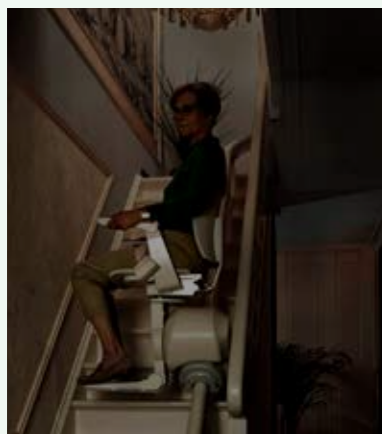

Le monte-escalier fonctionne également en cas de panne de courant.

## → PRATIQUE



Vous déployez et repliez le repose-pieds manuellement, à l'aide d'un levier ou électriquement.

## → SUR



Vous pouvez facilement attacher la ceinture.

## → PRATIQUE



Le monte-escalier est facile à actionner grâce au bouton sur l'accoudoir.

## → SUR



À la moindre résistance, le monte-escalier s'arrête automatiquement.

## → PRATIQUE



Le siège se replie entièrement et s'intègre dans votre intérieur.

# Solutions intelligentes du Mono

Le Mono propose un nombre de solutions intelligentes. Ainsi, vous pouvez faire pivoter l'assise manuellement ou automatiquement (en fonction du modèle) en haut de l'escalier pour descendre du siège en toute sécurité. Selon vos souhaits et la situation, vous pouvez, en outre, choisir un modèle dont le repose-pieds pivote ou pas dans le même sens que l'assise.



Avec le **Mono 2000**, vous optez pour une assise réglable manuellement (à l'aide d'un levier). Le repose-pieds ne pivote pas dans le même sens que l'assise. Vous pouvez toutefois déployer ou replier électriquement le repose-pieds.

Le **Mono 3000** vous permet d'actionner électriquement le repose-pieds et l'assise. Ici aussi, le sens de rotation du repose-pieds est désolidarisé de celui de l'assise. L'assise peut également pivoter en bas.



Le **Mono 4000** se distingue, quant à lui, par un pilotage électrique de l'assise et du repose-pied. Avec ce modèle, l'assise et le repose-pieds pivotent ensemble dans le même sens. Ce monte-escalier se prête aussi à la marche arrière, ce qui permet de monter des escaliers raides et étroits sans le moindre problème.



Départ vertical court



Courbe de stationnement inférieur



Courbe de stationnement supérieur



Incline finish




Mint start



Mint start : position de la chaise

# Dimensions

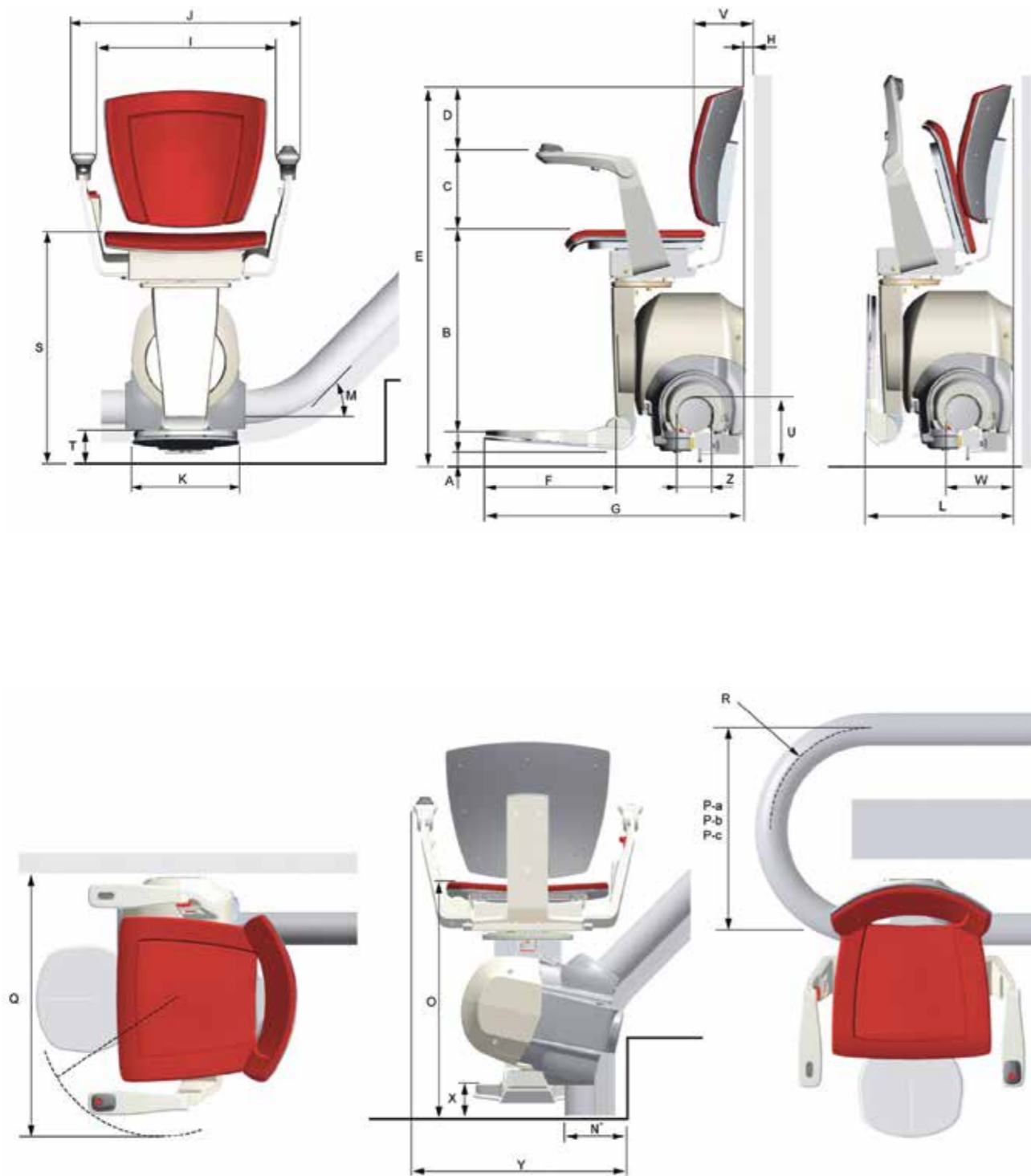

A.	Du sol au bas du repose-pied (sur une horizontale) .....	60 mm
B.	Du haut du repose-pied au haut de l'assise.....	490 mm
C.	Du haut de l'assise au haut de l'accoudoir .....	195 mm
D.	Du haut de l'accoudoir au haut du dossier .....	170 mm
E.	Hauteur totale .....	940 mm
F.	Longueur du repose-pied.....	325 mm
G.	Du devant du repose-pied au dos du siège.....	635 mm
H.	dossier du siège au mur (minime) .....	5 mm
I.	Largeur entre les accoudoirs .....	450 mm
J.	Largeur totale .....	580 mm
K.	Largeur du repose-pied .....	270 mm
L.	Largeur en position pliée .....	360 mm
M.	Angle d'inclinaison .....	0-70°
N.	De face du départ court au premier marche .....	170 mm
O.	Siège au sol (sur démarrage normal/départ court) .....	585 mm
P.	a) Coude à 180 sur le rail centre à centre maximal (0°) .....	392 mm
	b) Coude à 180 sur le rail centre à centre typique (40°) .....	250 mm
	c) Coude à 180 sur le rail centre à centre minimal (65°) .....	160 mm
Q.	Rayon de pivotement minimal du mur .....	660 mm
R.	Rayon de courbure sur la ligne médiane.....	196 mm
S.	De l'assise au sol (sur une horizontale).....	580 mm
T.	Du haut du repose-pied au sol (sur une horizontale) .....	85 mm
U.	haut du tube au sol (sur une course horizontale) .....	165 mm
V.	Du dos du siège (face intérieure) au mur.....	100 mm
W.	Du devant du rail au dos du siège .....	160 mm
X.	haut du repose-pied au sol (sur démarrage normal/départ court) ..	60 mm
Y.	accoudoir au premier montant (départ court) .....	510 mm
Z.	Diamètre du rail .....	60 mm

# Finitions

## REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER



**Gris**  
Tissu




**Brun**  
Tissu



**Rouge**  
Tissu



**Crème**  
Tissu

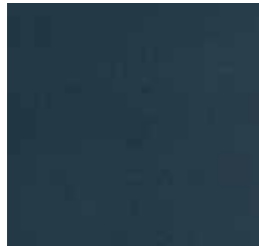


**Bleu**  
Cuir artificiel



**Noisette**  
Cuir artificiel



**Noir**  
Cuir artificiel

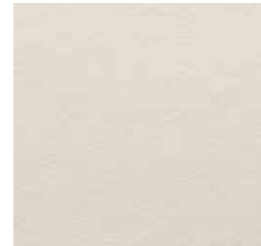

**Pearl blanc**  
Cuir artificiel




**Taupe**  
Cuir




**Marron**  
Cuir

## LAQUAGE



**RAL 9001**  
Blanc crème



**RAL 8025**  
Brun pâle

Les couleurs sont indicatives. Sous réserve de différences de couleur.

# Installation



Nous repartons seulement après une explication complète et personnalisée.



Fixé directement sur l'escalier.



Monté en seulement une demi-journée.



## Où pouvez-vous nous trouver?

SALLES D'EXPO UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

### BELGIQUE

#### Waregem (salle d'expo)

Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

#### Wemmel (salle d'expo)

Heide 7 | B-1780 Wemmel

#### Wilrijk


Prins Boudewijnlaan 321 | B-2610 Wilrijk

#### Thimister-Clermont

Rue du Bosquet 3 | B-4890 Thimister

#### Charleroi

Rue de Namur 17/A | B-6041 Charleroi

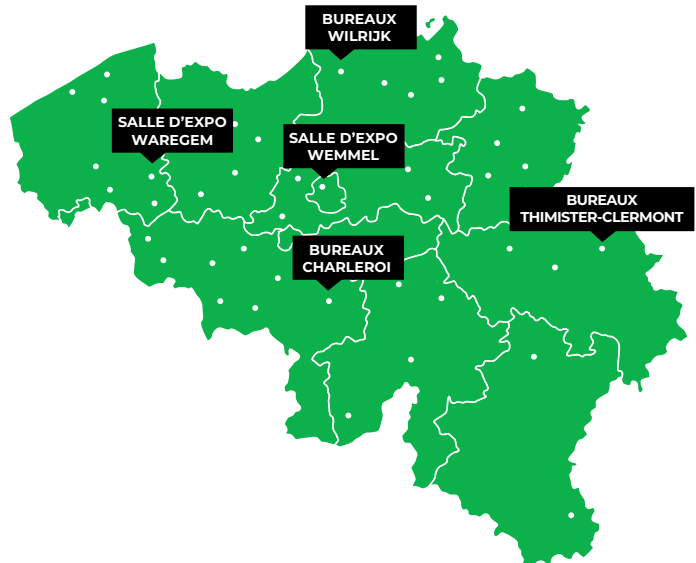

## Comment nous contacter?

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS POUR  
UNE OFFRE OU POUR FIXER UN RENDEZ-VOUS

 0800 20 950

 [WWW.COMFORTLIFT.BE](http://WWW.COMFORTLIFT.BE)



Ce document est non contractuel. Comfortlift se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications présentées.

©202112 - 035FR

**getting closer**

